



**ZKR**

Nurse Call Systems

---


**Система виклику медсестри**

**ZKR**

**Основи користування**


[www.zkr.systems](http://www.zkr.systems)

## Приліжковий виклик і базова трубка

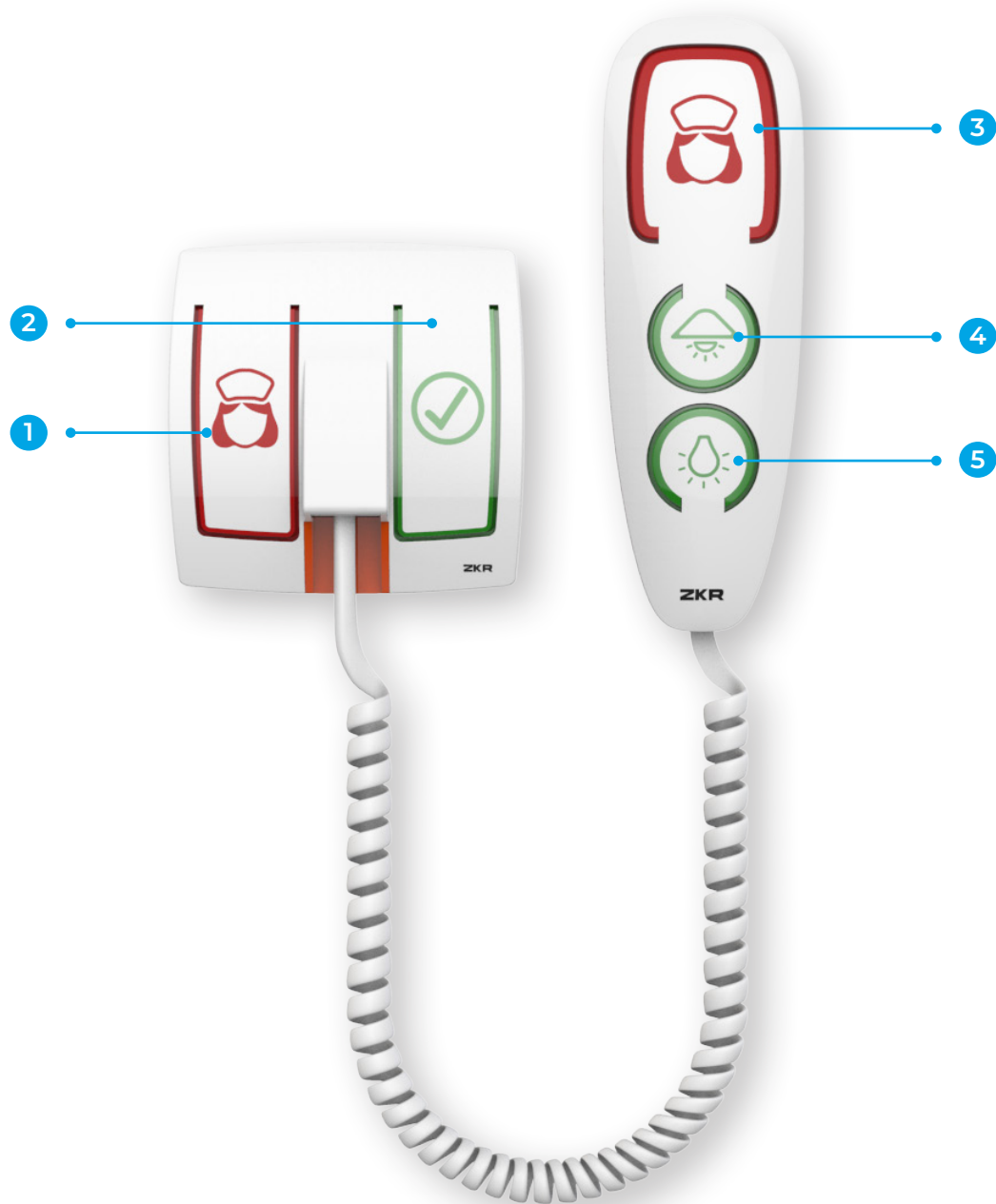


- ❶ Виклик медсестри
- ❷ Присутність медсестри
- ❸ Виклик медсестри (трубка)
- ❹ Кімнатне світло
- ❺ Світло для читання

## Професійна трубка

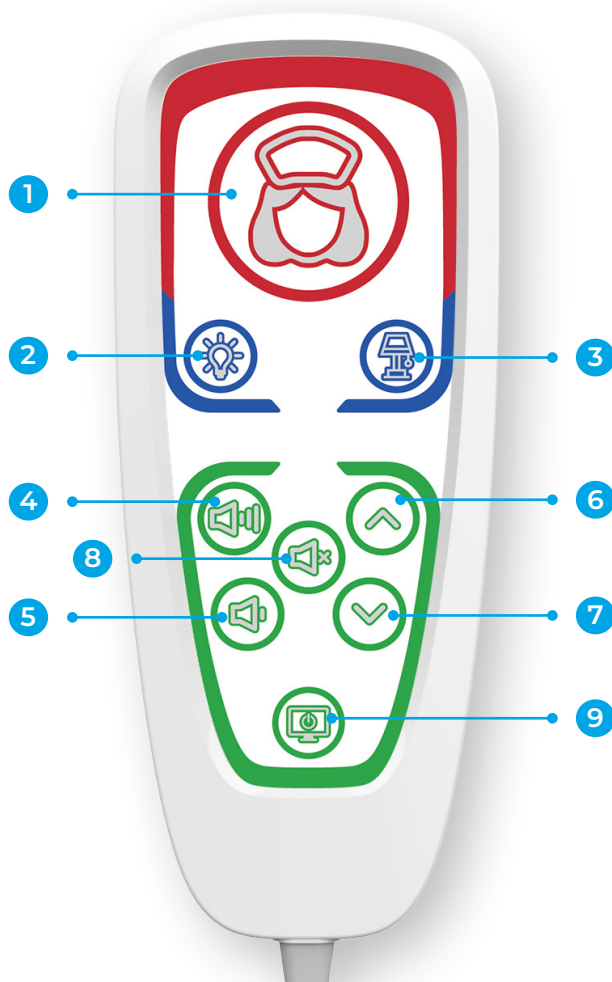


- 1 Виклик медсестри
- 2 Кімнатне світло
- 3 Світло для читання
- 4 Збільшення гучності ТВ
- 5 Зменшення гучності тел евізора
- 6 Телеканал вгору
- 7 Телеканал вниз
- 8 Перемикач звуку ТВ
- 9 Увімкнення/вимкнення ТВ

## Comfort VoIP Трубка

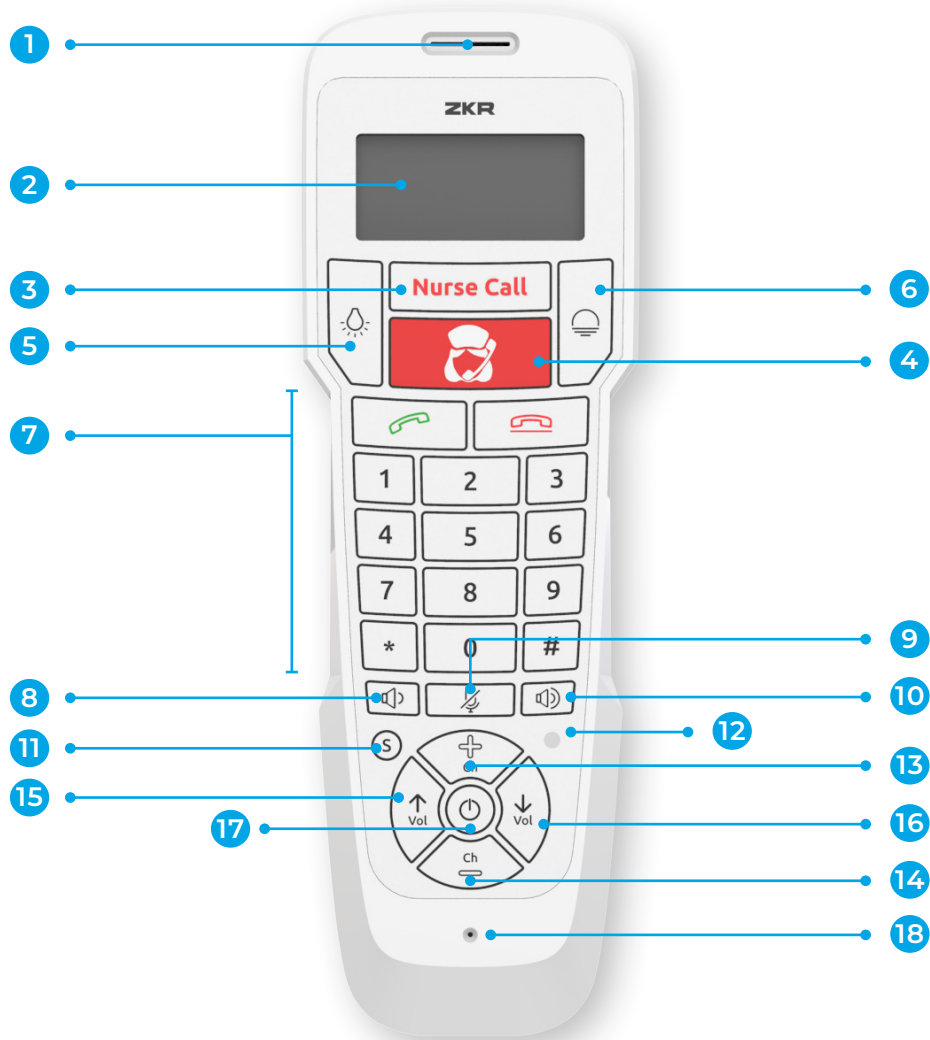

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 <b>Спікер</b>                    | 10 <b>Збільшення гучності тел</b>    |
| 2 <b>Екран</b>                     | 11 <b>Кнопка синхронізації</b>       |
| 3 <b>Виклик медсестри</b>          | 12 <b>Індикатор синхронізації</b>    |
| 4 <b>Медсестра VoIP виклик</b>     | 13 <b>Телеканал вгору</b>            |
| 5 <b>Кімнатне світло</b>           | 14 <b>Телеканал вимкнено</b>         |
| 6 <b>Керування завісою</b>         | 15 <b>Телеканал вгору</b>            |
| 7 <b>SIP-телефон з ручним наб.</b> | 16 <b>Зменшення гучності ТВ</b>      |
| 8 <b>Зменшення гучності тел</b>    | 17 <b>ТВ Вкл/Вимк</b>                |
| 9 <b>Вимкнення мікрофона</b>       | 18 <b>Мікрофон для VoIP-дзвінків</b> |


## Універсальна кнопка зі шнуром

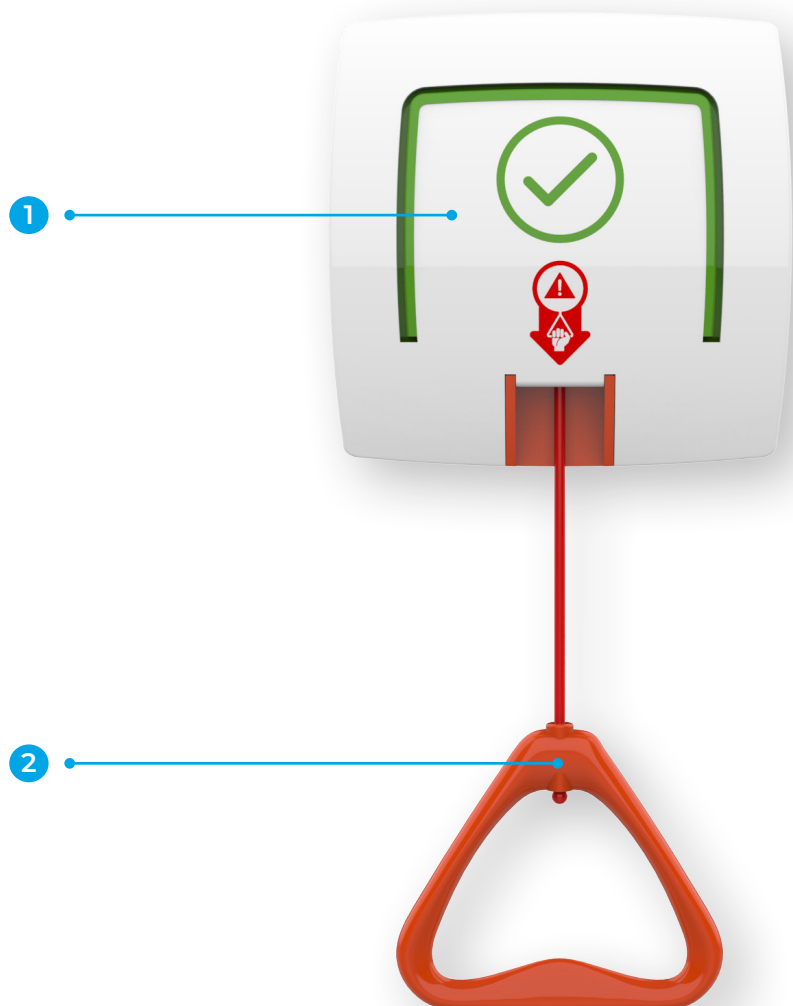

- 1 Присутність медсестри**
- 2 WC виклик медсестри**

## Світло над дверима

---

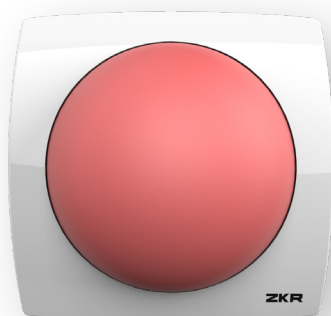

**За замовчуванням червоний:  
Активний  
Виклик медсестри**




**За замовчуванням зелений:  
Медсестра  
Присутня у кімнаті**



**За замовчуванням синій:  
Blue Code  
Надзвичайна ситуація**

# Пульт керування кімнатою VoIP

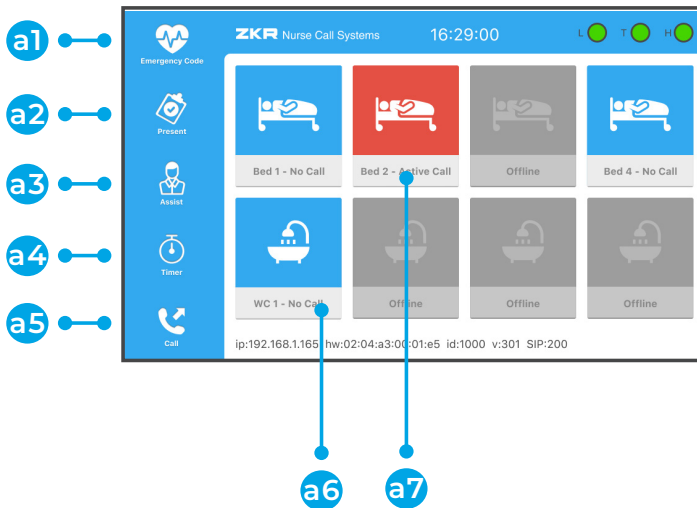

## Головний екран


- a1 Меню коду екстреної допомоги
- a2 Присутній - Натисніть, щоб увійти в кім-ту, коли немає активного дзвінка або завершити присутність медс.
- a3 Допомога - нат-ніть, щоб викл доп-гу або ввійти як допоміжна медсестра
- a4 Секундомір/таймер
- a5 Меню ручного набору виклику SIP
- a6 Значок кн. вик. туалету/ванної кім. (наразі немає дзвінка)
- a7 Значок кнопки виклик у в ліжку (зараз активний дзвінок)



## Екран запиту RFID

Деякі функції кімнатного керування Пристрій вимагає авторизації картки.

- b1 Зчитувач карток - покажіть свою картку тут щоб продовжити дію
- b2 Кнопка Скасуват

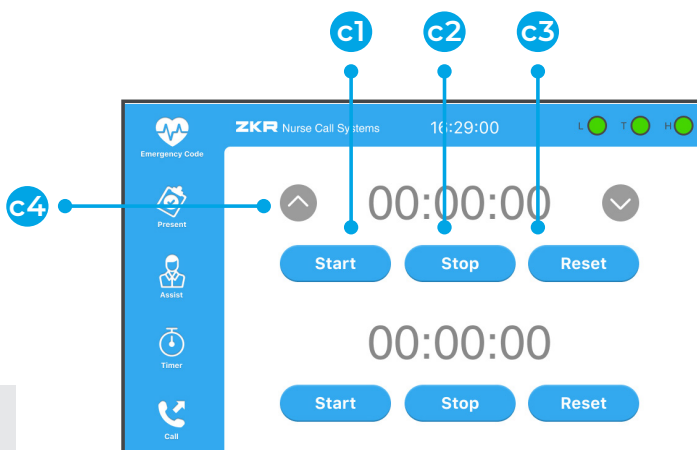


## Таймер

Таймер може викор-тися медс-ою як не обхідно встановити заплановані нагадування. Коли таймер закінчиться, з'явиться сповіщення автоматично надсилаються до панелі медсестер. Натисніть одну з цифр часу, який відображається до змініть його за допомогою стрілок.

- c1 Start Timer
- c2 Stop Timer
- c3 Reset Timer
- c4 Стрілка, щоб змінити вибрану цифру значення таймера


## Пульт керування кімнатою VoIP

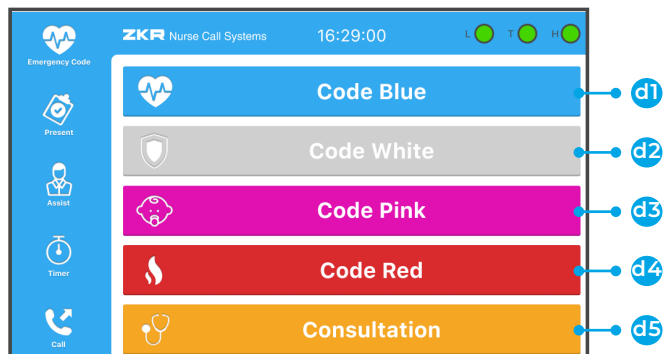

### Код надзвичайної ситуації


- d1 Код синій - зупинка серця
- d2 Код Білий - Безпека
- d3 Код Пінк - Викрадення дитини
- d4 Червоний код - вогонь
- d5 Меню консультації

Типи екстрених викликів можуть бути налаштований відповідно до потреб лікаря.

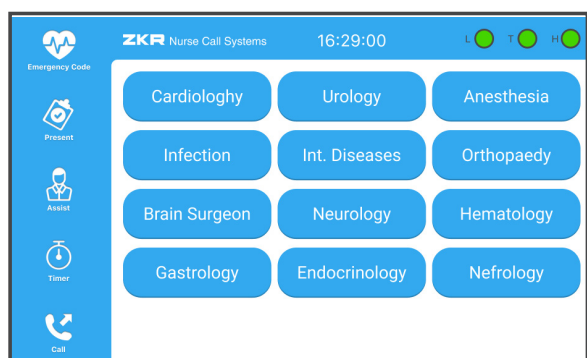

### Меню виклику консультації

На цьому екрані показано лікарню гілок, до яких можна зробити консультаційні дзвінки. Просто виберіть один і покажіть свою картку пристрою для зчитування карток звернутися до лікаря-консультанта. Назви гілок можна налаштувати із сервера.

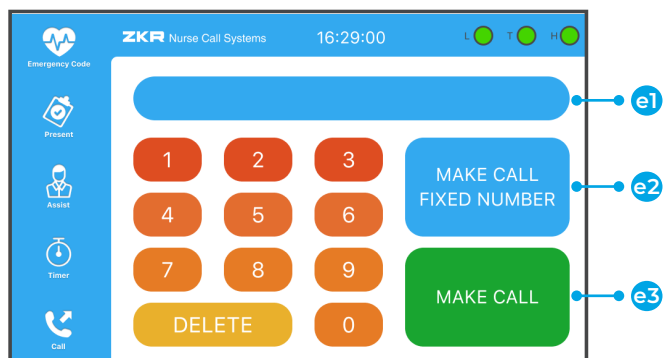

### Здійснити виклик

Ви можете використовувати цифрову клавіатуру, щоб набрати певний номер SIP або зателефонувати на стаціонарний номер (зазвичай панель медсестер)

- e1 Номер, який ви набираєте, буде з'являтися тут
- e2 Зателефонувати на фіксований номер - натисніть, щоб швидко викликати і призначений фіксований номер
- e3 Здійснити виклик - натисніть після набору номеру SIP, на який ви хочете зателефонувати

## Журнали та графічні звіти

Щоб отримати доступ до журналів і графічних звітів, введіть IP-адресу сервера додатків адресний рядок браузера.

За замовчуванням:  
username: rapor  
password: rapor

### Журнали/Журнали викликів

На цій сторінці ви можете переглянути журнал викликів дані та статистика.

1. Журнали можна фільтрувати за замовчуванням, або за допомогою спеціальних параметрів

Спеціальний запит.

2. Деталі: перевірте деталі дзвінка, за потреби додайте примітку.

Logs/Call Detail Records





1. Записи можна фільтрувати за замовчуванням і фільтрами або за допомогою спеціальних параметрів

Спеціальний запит.

2. Записаний голосовий файл можна прослухати або завантажено

### Графічний звіт/Гучність дзвінків

Кількість дзвінків по місяцях можна побачити на цій сторінці. Графік можна фільтрувати за Область, точка, тип виклику та рік.

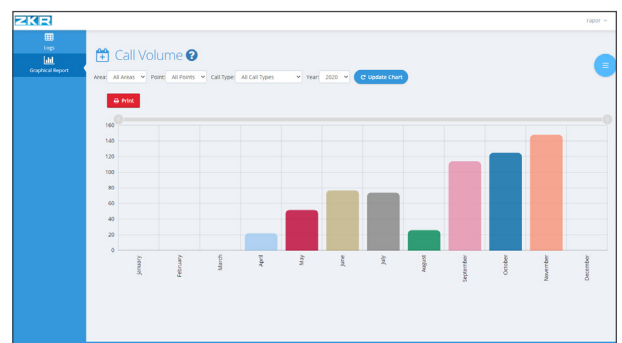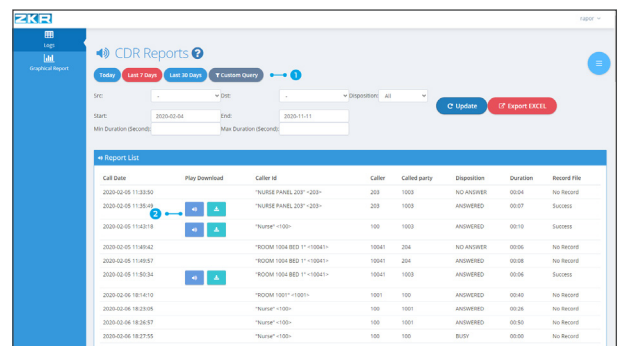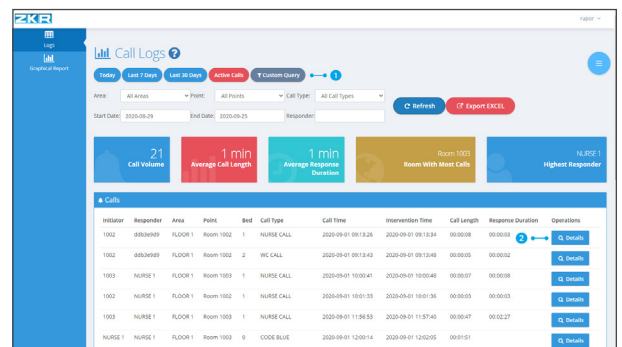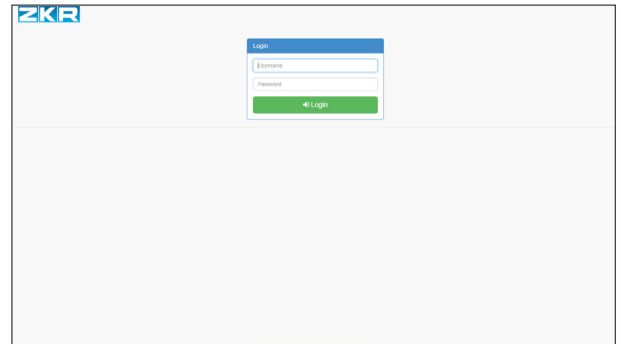



# Медсестринська панель VoIP



## Головний екран

**a1** **Онлайн-кімната** – існуючі кімнати. Зараз онлайн і призначено до цієї медсестринської панелі та кімнат. Від панелей медсестер направлено цю панель.

**a2** **Офлайн кімната** – Кімнати, які зараз офлайн або призначені іншій групі медсестер, але додані до списку цієї панелі викликаються під час пересилання.




**a3** **Активн. дзвінок**

**a4** **Активний Виклик Медсестри**



**a5** **Активний код Blue Emergency** - Коли їх більше одного вид діяльності в кімнаті, один з найбільших пріоритетом буде диктувати колір кнопки та будильника звук, а інші будуть перераховані далі кнопку.

**a6** **Активний виклик медсестри**

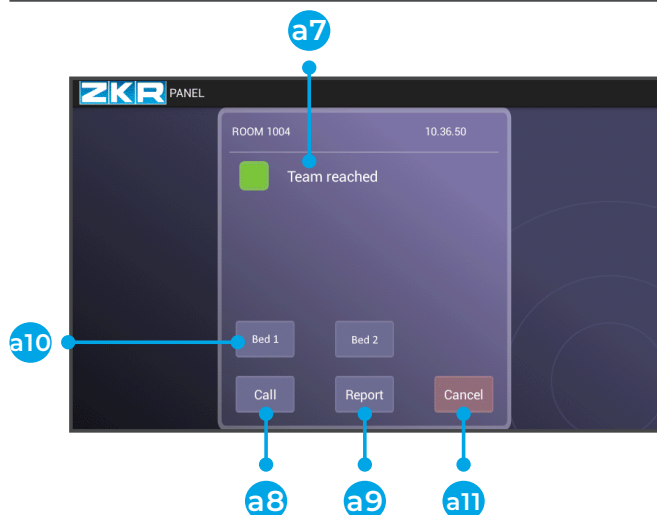


**Натиснувши кнопку онлайн-кімнати ви побачите цей екран.**

- a7 Поточний статус виклику кімнати**
- a8 Дзвінок – голосовий дзвінок у кімнату Блок у поточній кімнаті.**
- a9 Звіт – перейдіть до веб-інтерфейсу для журналів і звітів**
- a10 Ліжко – показує статус активного виклику блоку виклику. Натисніть для голосового виклику до телефонної трубки VoIP Comfort на ліжку якщо доступний.**
- a11 Скасувати – повернутися до головного екрана**




**Натиснувши «Дзвінок» у меню кімнати, це з'явиться екран голосового виклику.**


- a12 Панель набору – відкрийте панель набору, щоб змінити номер для дзвінка.**
- a13 Скасувати/Відмінити – скасувати поточний виклик**
- a14 Гучність – налаштування гучності**
- a15 Вимкнути звук**
- a16 Повторний набір – повторний набір останнього номера**

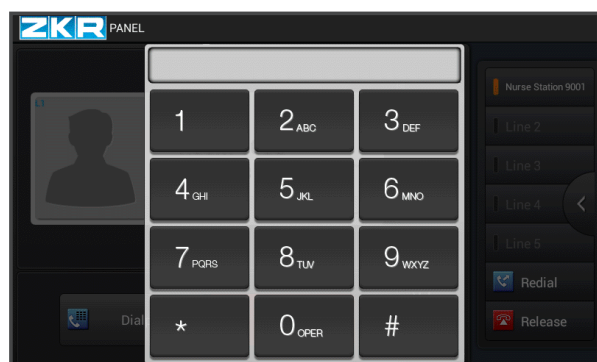


**Використовуйте цифрову клавіатуру для виклику пристроїв VoIP визначені на сервері, наприклад кімната Блоки керування, трубки MCW та інші панелі медсестер.**

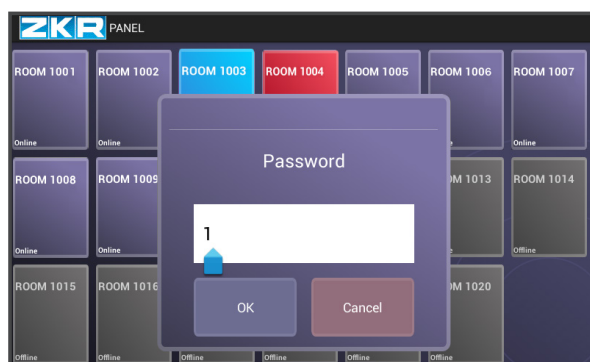


**Меню призначене для доступу до налаштувань які доступні лише за допомогою PIN-коду Код.**

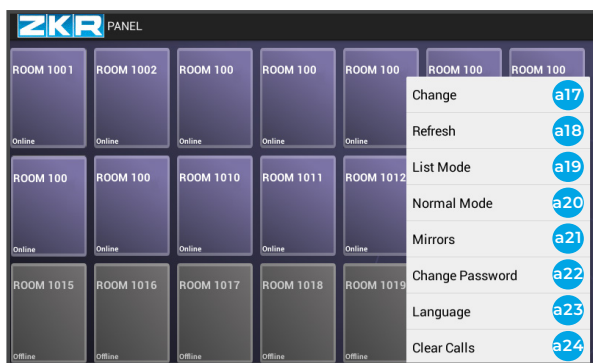

- a17 **Змінити – меню налаштувань для конфігурація панелі**
- a18 **Ref resh – Оновити підключення до Зміни конфігурації сервера.**
- a19 **Режим списку – Альтернативний головний екран Макет.**
- a20 **Звичайний режим – головний екран за замовчуванням Макет**
- a21 **Дзеркала – меню налаштувань дзеркала Панель / Переадресація**
- a22 **Змінити пароль – змінити PIN-код, який використовується для авторизації**
- a23 **Мова – виберіть інтерфейс мова**
- a24 **Очистити виклики – видалити активний виклик індикація на кнопках кімнати. Це не скасовує лише дзвінки очищає інтерфейс.**

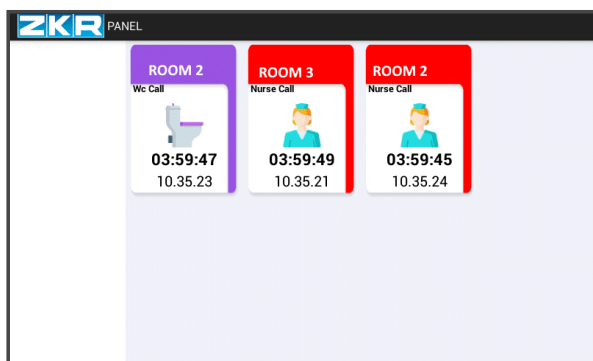

Вибравши режим списку з меню Головний екран програми Панелі будуть показані таким чином. Це макет показує лише активні дзвінки та присутність замість того, щоб мати кімнату Кнопка для кожної кімнати. Це може бути бажано, якщо велика кількість кімнат призначаються до Панелі. Це меню показує панелі медсестер які призначені поточному панелі і доступний для пересилання.

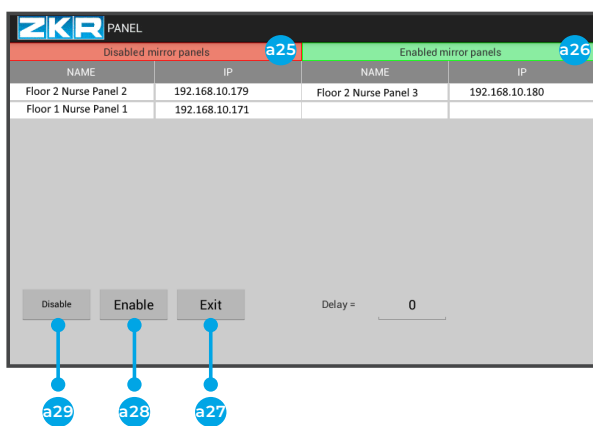

- a25 **Вимкнені дзеркальні панелі – список панелей, які доступні для Віддзеркалення цієї панелі**
- a26 **Увімкнені дзеркальні панелі – список Панелі наразі віддзеркалюються цю панель**
- a27 **Вихід – вихід із меню Mirror Panel**
- a28 **Увімкнути – увімкнути дзеркальне відображення вибрана медсестра**
- a29 **Вимкнути – вимкнути дзеркальне відображення обрана дзеркальна панель**